

Specyfikacja techniczna poduszek



Vita

Poduszka klasyczna

Wymiary:

43 x 43 x 7 cm

Poszycie:

230 g/m² poliuretan* pokryty nylonem
Spód antypoślizgowy

Wypełnienie:

45mm piankapozycjonująca 60kg/m³
25 mm pianka twarda 40kg/m³

Turkey

Poduszka pozycjonująca

Wymiary:

43 x 43 x 7 cm

Poszycie:

230 g/m² poliuretan* pokryty nylonem
Spód antypoślizgowy

Wypełnienie:

100% 60 kg/m³ pianka pozycjonująca

Kaymed

Poduszka 3-warstwowa

Wymiary:

43 x 43 x 7,5 cm

Poszycie:

230 g/m² poliuretan* pokryty nylonem
Spód antypoślizgowy

Wypełnienie:

Góra: 2cm miękka pianka 85 kg/m³
Środek: 3,5 cm pianka pozycjonująca 60 kg/m³
Spód: 2 cm twarda pianka 50 kg/m³

*Wszystkie pianki poliuretanowe uzyskały ocenę „V”, tzn. że posiadają bardzo wysoką odporność zbadaną w niezależnych testach wytrzymałości. Pianki zostały przycięte konturowo w celu zwiększenia redukcji nacisku i zapewnienia elastyczności materaca.

Certyfikaty

Produkty SleepAngel™ zostały oznaczone znakiem CE klasy I dla Wyrobów Medycznych i są zgodne z Dyrektywą w sprawie Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Firma Gabriel Scientific posiada dokumentację techniczną, która zawiera procedury kontroli jakości, wyniki badań, ocenę ryzyka, informacje na temat badania klinicznego itp. Dokumentacja techniczna została sprawdzona i uzyskała certyfikat organu właściwego dla wdrożenia dyrektywy (IMB).



Sleep
Angel

BestMI - Best Medical Innovations Sp. z o.o

ul. Puławska 479/2
02-844 Warszawa
tel./fax +48 22 644 99 77

www.bestmi.pl
e-mail: biuro@bestmi.pl
NIP: 525-25-86-781


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000514471

Poduszki do wózków inwalidzkich

Poduszki przeciwoleżynowe SleepAngel równomiernie rozkładają ciężar ciała, zmniejszają ryzyko odleżyn i wspomagają profilaktykę przeciwoleżynową. Dają poczucie komfortu podczas użytkowania, a antypoślizgowy spód zapewnia poczucie bezpieczeństwa podczas siedzenia.

Ochrona przed infekcjami

- ✓ SleepAngel™ jest sprawdzoną barierą przeciw patogenom takim jak MRSA, C.diff i norowirusy
- ✓ Całkowicie szczelna, oddychająca, z filtrem bakteriologicznym
- ✓ Blokuje przedostawanie się do wnętrza patogenów w postaci płynów lub z powietrza
- ✓ Wytrzymała mechanicznie - trudna do rozerwania i zgniecenia
- ✓ Łatwe czyszczenie środkami ogólnodostępnymi

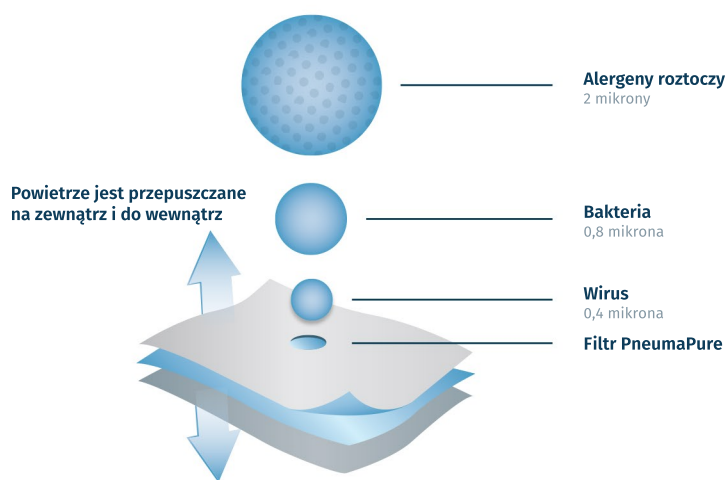

JAK DZIAŁA TECHNOLOGIA FILTRACYJNA PNEUMAPURE?

Technologia PneumaPure to inteligentne zastosowanie wodoodpornego mechanizmu filtrującego w produkcie amortyzującym – poduszce kładzonej na łóżku, w kołdrze, materacu i poduszce kładzonej na sofie czy fotelu.

Filtr to wodoodporny nano-porowaty kompozyt, który jest hydrofobowy i działa jako oddychająca bariera. Filtr został w sposób unikalny wzmocniony i przystosowany do zastosowań amortyzacyjnych. W efekcie filtr PneumaPure zapobiega przedostawaniu się płynu i patogenów przenoszonych przez powietrze do wnętrza produktu, przy jednoczesnej możliwości wentylacji. (Transport powietrza do środka i na zewnątrz produktu jest niezbędny, aby umożliwić prawidłowe dopasowanie do ciała i okrycie pacjenta).

Profilaktyka i kontrola zakażeń - materac został hermetycznie uszczelniony na szwach, a cała jego konstrukcja stanowi sprawdzoną barierę chroniącą przed wnikaniem drobnoustrojów i alergenów do wnętrza, w tym patogenów szpitalnych tj. MRSA i C. diff. Materac przepuszcza powietrze dzięki specjalnemu filtrowi PneumaPure, który również został sprawdzony pod kątem zabezpieczenia przed wnikaniem bakterii i alergenów. System wentylacyjny sprawia idealne dopasowanie siedziska do ciała pacjenta. Wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodę i zmniejszyć siłę nacisku.

Kluczową cechą technologii PneumaPure™, jest fakt, że stanowi ona barierę fizyczną, a nie chemiczną.